

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENROHLINGE ORTHOPAEDIC INSOLE BLANKS
LAGERSORTIMENT WAREHOUSE RANGE



**HIER FÜHLE
ICH MICH GUT
BERATEN!**

I FEEL WELL
ADVISED HERE!



PRODUKTSUCHE PRODUCT SEARCH



Über unsere Produktsuche finden Sie immer den passenden Einlagenrohling.

You will always find the right insole blank via our product search.

UNSER KUNDENSERVICE IST GERNE FÜR SIE DA! **SCHEIN DIREKT**

TEL.: +49 2191 910-200

FAX: +49 2191 910-100

Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr

Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr

OUR CUSTOMER SERVICE WILL BE GLAD TO BE AT YOUR DISPOSAL **SCHEIN DIRECT**

TEL.: +49 2191 910-200

FAX: +49 2191 910-100

Monday to Thursday 08.00 to 18.00

Friday 08.00 to 17.00

BESTELLSYSTEM ORDER SYSTEM

Registrieren Sie sich als Kunde unter <https://shop.schein.de> und geben Sie Ihre Bestellung direkt in unser System ein. Hier finden Sie in den Kategorien Einlagen, Schuhe, Material, Werkzeuge und Maschinen unsere Produkte und können diese zu jeder Zeit einfach und bequem bestellen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihre Bestellungen können Sie einfacher, schneller und jeder Zeit tätigen und gewinnen so mehr Zeit für Ihre Kunden.

Register as a customer at <https://shop.schein.de> and enter your order directly into our system. You will find our products there, separated into the categories insoles, shoes, materials, tools and machines, and can order them easily and conveniently at any time. The benefits are clear: you can place your Schein orders more easily, quickly and any time, freeing up more time for your customers.

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

KUNSTSTOFF EINLAGENROHLINGE

SYNTHETIC INSOLE BLANKS



- NOVAPED S90 SKIN (Sneaker/Business)
- NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS (Sneaker/Business)
- NOVAPED S90 SKIN HALLUX
- NOVAPED S90 NOVATHERM



6

7

8

9

SENSOMOTORISCHE EINLAGENROHLINGE

SENSOMOTORIC INSOLE BLANKS



- NOVAPED SENSOCAD (neutral)
- NOVAPED SENSOCAD (planovalgus/adductus)
- NOVAPED SENSOCAD (cavus/equinus)

18

19

20

WEICHPOLSTER EINLAGENROHLINGE

SOFT CUSHIONING INSOLE BLANKS



- NOVAPED SOFT
- NOVAPED SOFT (einschichtig/single layer)
- NOVAPED SOFT CALCANEUS



10/11

12

13

KINDER EINLAGENROHLINGE

KIDS INSOLE BLANKS



- NOVAPED S90 PLATEAU (schalig/cup-shaped)

21

PU EINLAGENROHLINGE

PU INSOLE BLANKS



- NOVAPED PU
- NOVAPED PU (individuell/individual)
- NOVAPED PU (Bezug/cover)
- NOVAPED PU KORK/CORK



14

15

16

17

SPORT EINLAGENROHLINGE

SPORTS INSOLE BLANKS



- NOVAPED PERFORMANCE (soft)
- NOVAPED PERFORMANCE (medium/plus)
- NOVAPED SPORTS
- NOVAPED ACTIVE

22

23

24

25

SICHERHEITS EINLAGENROHLINGE

SAFETY INSOLE BLANKS



SOFT PROTECT



26/27

BASIS EINLAGENROHLINGE

BASIC INSOLE BLANKS



NOVAPED FLEX BASIC

28

NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

29

NOVAPED SOFT BASIC

30

NOVAPED KORK BASIC

31

INDIKATIONEN*

INDICATIONS*



NORMALFUSS
NORMAL FOOT



KLUMPFUSS
CLUB FOOT



SPREIZFUSS/METATARSALGIE
SPRAY FOOT/METATARSALGY



SPITZFUSS
POINTED FOOT



KNICKFUSS
SKEW FOOT



HALLUX VALGUS
HALLUX VALGUS



SENKFUSS/PLATTFUSS
FALLEN ARCHES/FLAT FOOT



HALLUX RIGIDUS/LIMITUS
HALLUX RIGIDUS/LIMITUS



HOHLFUSS
HIGH ARCHES



FERSENSPORN/PLANTARFASZIITIS
HEEL SPUR/PLANTARFASCIITIS



SICHELFUSS
PIGEON TOES

* Die Einlagenrohlinge können durch entsprechende Weiterverarbeitung nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker individuell für einen Kunden zu einer indikationsbezogenen Sonderanfertigung werden.

* In line with a medical prescription, these insole blanks can be suitably individually adjusted for a customer by a healthcare technician into a indication-related special construction.

NOVAPED S90 SKIN

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin weist eine dünne und leichte Bauweise auf mit optimaler Unterstützung der Fußstruktur und hohem Tragekomfort. Der glasfaserverstärkte Einlagenkern bietet dabei eine hohe Stabilität im Längsgewölbe und in der Ferse. Zusätzliche Fersen- und Ballenpolster reduzieren punktuellen Druck bei Beschwerden im Fersen- und Ballenbereich. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin supporting insole blank with skin film technology has a thin and lightweight design with optimal support of the foot structure and a high level of wearing comfort. The glass-fibre-reinforced insole core provides high stability in the longitudinal arch and heel. Additional heel and bunion pads reduce localised pressure in the event of heel and bunion complaints. The insole blank can be thermoformed/ shaped and easily ground for an individual fit.

FERSENPOLSTER
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 3 mm

HEEL PAD
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 3 mm

POLSTER
langsohlig
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 2 mm

CUSHIONING
long
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 2 mm

BEZUG
OnDry geprägt, dunkelgrau

COVER
OnDry embossed, dark grey

UNTERBAU
Skin Folientechnik, weiß

BASE
skin film technology, white

VERSTÄRKUNG
Scheinflex/Scheinflex Plus

REINFORCEMENT
Scheinflex/Scheinflex Plus

ART.-NR.
CODE NO.
989810000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	BESONDERHEIT CHARACTERISTICS	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989810000	35–50	S90 Skin Sneaker S90 Skin Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	Fersenpolster heel pad	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989808968	35–48	S90 Skin Business S90 Skin Business	–	–	Fersen- und Ballenpolster heel and bunion pad	–	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
989808968

S90 SKIN BUSINESS
ohne Bezug und Pelotte
Ballenpolster, p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm
Fersenpolster, p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm


S90 SKIN BUSINESS
without cover and pad
bunion pad, p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm
heel pad, p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm



NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin Calcaneus ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Die Fußstruktur wird gezielt unterstützt und entlastet. Durch eine anatomisch angepasste Aussparung in der Fersenmitte und Tieferlegung der plantaren Sehnenstruktur gepaart mit dem Einsatz einer durchdachten Polsterkombination. Glasfaserverstärkte Bauteile erhöhen dabei die Stabilität im Längsgewölbe. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Calcaneus supportive insole blank with skin film technology is specially designed for use in cases of overuse symptoms or pain in the calcaneus area. The foot structure receives targeted support and relief through an anatomically adapted cutout in the centre of the heel and lowering of the plantar tendon structure paired with the use of a sophisticated cushioning combination. Glass-fibre-reinforced components increase stability in the longitudinal arch. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.

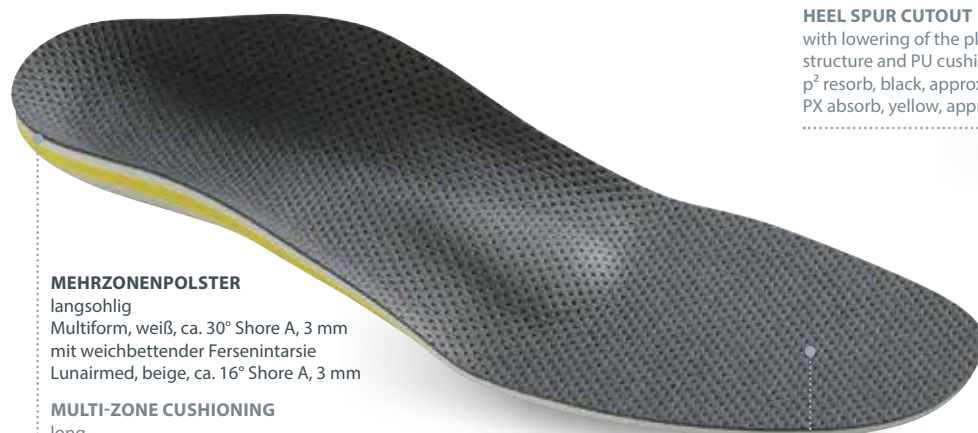

MEHRZONENPOLSTER

langsohlig
Multiform, weiß, ca. 30° Shore A, 3 mm
mit weichbettender Fersenintarsie
Lunairmed, beige, ca. 16° Shore A, 3 mm

MULTI-ZONE CUSHIONING

long
Multiform, white, approx. 30° Shore A, 3 mm
with soft heel inlay
Lunairmed, beige, approx. 16° Shore A, 3 mm

UNTERBAU

Skin Folientechnik, weiß

BASE

skin film technology, white

VERSTÄRKUNG

Scheinflex/Scheinflex Plus

REINFORCEMENT

Scheinflex/Scheinflex Plus

FERSENSPORNAUSSPARUNG

mit Tieferlegung der Plantarsehnenstruktur und PU-Polstermaterialien
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm
PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

HEEL SPUR CUTOUT

with lowering of the plantar tendon structure and PU cushioning materials
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm
PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm



BEZUG

OnDry geprägt, dunkelgrau

COVER

OnDry embossed, dark grey

ART.-NR.
CODE NO.
989820000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989820000	35-50	S90 Skin Calcaneus Sneaker S90 Skin Calcaneus Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989820174	35-50	S90 Skin Calcaneus Sneaker, unverklebt S90 Skin Calcaneus Sneaker, unbonded	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
989820174

S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNVERKLEBT

Bezug mit Polster und Pelotte beiliegend
Fersenpolster, p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm
Fersenpolster, PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNBONDED

cover with cushioning and pad enclosed
heel pad, p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm
heel pad, PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm



NOVAPED S90 SKIN HALLUX

Der Einlagenrohling Novaped S90 Skin Hallux ist speziell für den Einsatz bei Bewegungseinschränkungen des Großzehengrundgelenks entwickelt. Dabei „schiebt“ die Rigidusfeder das Großzehengrundgelenk und limitiert dessen Beweglichkeit. Die dünne und leichte Bauweise mit glasfaserverstärktem Einlagenkern bietet hohe Stabilität und optimale Unterstützung der Fußstruktur mit hohem Tragekomfort. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/ anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Hallux insole blank is specially designed for use in cases of restricted movement of the metatarsophalangeal joint of the big toe. The rigidus spring ‘splints’ the metatarsophalangeal joint of the big toe and limits its mobility. The thin and lightweight design with a glass-fibre-reinforced insole core provides high stability and optimal support of the foot structure with a high level of wearing comfort. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.



POLSTER
langsohlig
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 2 mm

CUSHIONING
long
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 2 mm

BESONDERHEIT
lange Rigidusfeder

CHARACTERISTICS
long rigidus spring

UNTERBAU
Skin Folientechnik, weiß

BASE
skin film technology, white

VERSTÄRKUNG
Scheinflex/Scheinflex Plus

REINFORCEMENT
Scheinflex/Scheinflex Plus



BEZUG
OnDry geprägt, dunkelgrau

COVER
OnDry embossed, dark grey

ART.-NR.
CODE NO.
989899000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989899000	35–48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989899968	35–48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	–	–	–	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



S90 Skin Hallux
ohne Bezug, Polster und Pelotte

S90 Skin Hallux
without cover, cushioning and pad

ART.-NR.
CODE NO.
989899968



NOVAPED S90 NOVATHERM

Der in Folientechnik hergestellte Novaped S90 Novatherm Einlagenrohling zeichnet sich durch seine geringe Stärke, extreme Flexibilität und weiche formstabile Kanten aus. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Die Versteifung aus Scheinflex sorgt dabei für eine hohe Stützfunktion. Das Material lässt sich außerdem hervorragend thermoplastisch verformen und individuell gestalten.

The Novaped S90 Novatherm insole blank, manufactured using film technology, is characterised by its low thickness, extreme flexibility and soft, but inherently stable, edges. It has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The reinforcement made of Scheinflex provides a high level of support. The material is thermoplastic, making it ideal to reshape and customise.

UNTERBAU
Folientechnik, transparent

BASE
film technology, transparent

VERSTÄRKUNG
Scheinflex

REINFORCEMENT
Scheinflex

KUNSTSTOFF
SYNTHETIC



ART.-NR.
CODE NO.
955159300



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
955159300	35–48	S90 Novatherm S90 Novatherm	–	–	–	universal universal

NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstabiles Multiform-Material. In Kombination mit dem Bezugsmaterial aus Pigreco wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert. Der Rohling lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. The wearing comfort is further increased by the Pigreco cover. It can be thermally formed and easily processed, making quick and easy individual adaptation to the user's foot possible.

FERSENPOLSTER

p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 1 mm

HEEL PAD

p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 1 mm

POLSTER

langsohlig
Multiform perforiert, grau,
ca. 30° Shore A, 4 mm

CUSHIONING

long
Multiform perforated, grey,
approx. 30° Shore A, 4 mm

UNTERBAU

Multiforte, schwarz,
ca. 40° Shore A, 12 mm

BASE

Multiforte, black,
approx. 40° Shore A, 12 mm

VERSTÄRKUNG

THK

REINFORCEMENT

THK

BEZUG

Pigreco perforiert, grau

COVER

Pigreco perforated, grey

ART.-NR.
CODE NO.
974804000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974804000	35-50	Soft Soft	Pigreco perforiert, grau Pigreco perforated, grey	Multiform, grau Multiform, grey	Multiform, schwarz Multiform, black	Tropfenform drop shape	universal universal

NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstabiles Multiform-Material. Es lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. It can be thermally formed and easily processed, making quick and individual adaptation to the users foot possible.



WEICHPOLSTER
SOFT CUSHIONING

ART.-NR.
CODE NO.
974814177



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974814177	35–48	Soft Soft	–	Multiform, blau Multiform, blue	Multiform, weiß Multiform, white	Tropfenform drop shape	universal universal

NOVAPED SOFT

Der einschichtige Novaped Soft Einlagenrohling sorgt für eine effektive Druckentlastung. Bestehend aus weichem Multiform-Material ist der Einlagenrohling gleichzeitig formstabil, sodass er Überlastungen entgegengewirkt und Druckspitzen flächig verteilt werden. Das vorgeformte Längsgewölbe ist moderat gehalten und die Ferse leicht geführt. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten.

The single-layer Novaped Soft insole blank provides effective pressure relief. Made of soft Multiform material, the insole blank is dimensionally stable at the same time, so that overloading is counteracted and pressure peaks are distributed evenly. The pre-shaped longitudinal arch is kept moderate and the heel is lightly guided. The insole blank can be thermally formed and easily processed.



BESONDERHEIT
Vorfuß-Vorschliff

CHARACTERISTICS
pre-ground forefoot

UNTERBAU
Multiform, weiß,
ca. 30° Shore A, 15 mm

BASE
Multiform, white,
approx. 30° Shore A, 15 mm



ART.-NR.
CODE NO.
877851000




ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
877851000	35–48	Soft, einschichtig Soft, single layer	–	–	Multiform, weiß Multiform, white	Tropfenform drop shape	Bequemschuhform comfort shoe shape

NOVAPED SOFT CALCANEUS

Der bettende Einlagenrohling Novaped Soft Calcaneus in Weichpolstertechnik ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Für eine gezielte Entlastung der Fußstruktur sorgt der formgebende Unterbau aus Multiforte durch den Einsatz von entlastenden (p² resorb) oder absorbierenden (p² absorb) PU-Materialien, gepaart mit einer besonderen langsohligen Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch anformen und einfach beschleifen.

The Novaped Soft Calcaneus bedding insole blank with soft padding technology is specially designed for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The shaping base made of Multiforte provides targeted relief for the foot structure through the use of relieving (p² resorb) or absorbing (p² absorb) PU materials paired with special long Multiform cushioning with multi-zone technology. The insole blank can be thermally formed and easily ground.

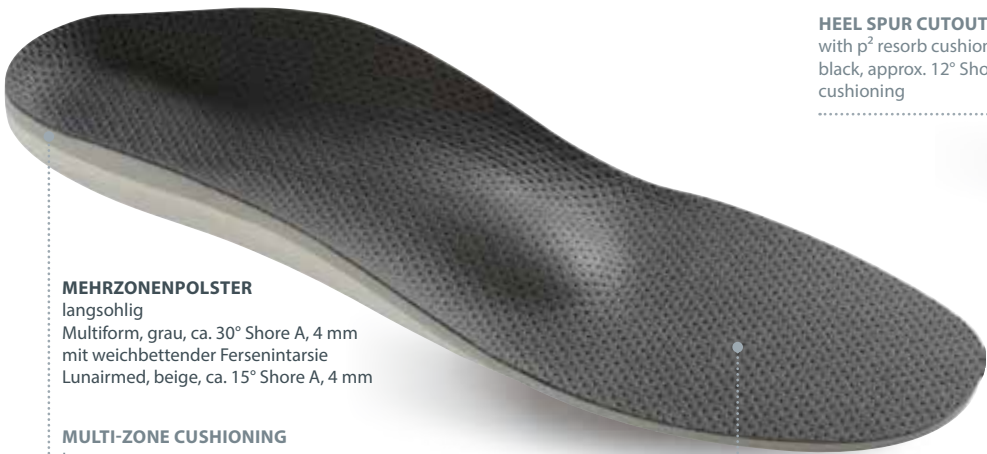

MEHRZONENPOLSTER

langsohlig
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 4 mm
mit weichbettender Fersenintarsie
Lunairmed, beige, ca. 15° Shore A, 4 mm

MULTI-ZONE CUSHIONING

long
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 4 mm
with soft heel inlay
Lunairmed, beige, approx. 15° Shore A, 4 mm

ART.-NR.
CODE NO.
979828000

UNTERBAU
Multiforte, weiß,
ca. 40° Shore A, Vorschliff

BASE
Multiforte, white,
approx. 40° Shore A, pre-ground

VERSTÄRKUNG
THK

REINFORCEMENT
THK

FERSENSPORN AUSSPARUNG
mit p² resorb-Polstermaterial,
schwarz, ca. 12° Shore A,
dämpfend

HEEL SPUR CUTOUT
with p² resorb cushioning material,
black, approx. 12° Shore A,
cushioning

BEZUG
OnDry geprägt, dunkelgrau

COVER
OnDry embossed, dark grey



WEICHPOLSTER
SOFT CUSHIONING



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979828000	35-50	Soft Calcaneus resorb Soft Calcaneus resorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/ Lunairmed, beige Multiform, white/ Lunairmed, beige	Multiforte, weiß/ p ² resorb, schwarz Multiforte, white/ p ² resorb, black	Tropfenform drop shape	universal universal
979825000	35-50	Soft Calcaneus absorb Soft Calcaneus absorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/ Lunairmed, beige Multiform, white/ Lunairmed, beige	Multiforte, schwarz/ p ² absorb, grün Multiforte, black/ p ² absorb, green	Tropfenform drop shape	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



SOFT CALCANEUS ABSORB
Fersenpolster, p² absorb, grün, ca. 22° Shore A,
stoßabsorbierend, entlastend

SOFT CALCANEUS ABSORB
heel pad, p² absorb, green, approx. 22° Shore A,
shock-absorbing, relieving



ART.-NR.
CODE NO.
979825000

NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. Durch sein Ausgangsmaterial kann der PU Einlagenrohling sehr gut weiterverarbeitet werden.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. Due to its raw material, the PU insole blank can be further processed very well.

BASISMODUL PU
weiß, ca. 35° Shore A

BASE MODULE PU
white, approx. 35° Shore A

VERSTEIGUNG
TPU
REINFORCEMENT
TPU



ART.-NR.
CODE NO.
670100000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670100000	35-50	PU PU	-	-	Tropfenform drop shape	universal universal
670100300	35-50	PU PU	-	-	-	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



PU
ohne Pelotte
PU
without pad



ART.-NR.
CODE NO.
670100300

NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. Die Decke aus Multiform-Material bietet eine zusätzliche bewährte Polsterung und ermöglicht eine sehr gute Verklebbarkeit und individuelle Weiterverarbeitung.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The Multiform material provides additional proven cushioning and enables very good gluing properties and individual finishing.



POLSTER
langsohlig
Multiform, grau,
ca. 30° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
long
Multiform, grey,
approx. 30° Shore A, 1.5 mm

ART.-NR.
CODE NO.
670130150

BASISMODUL PU
weiß, ca. 35° Shore A

BASE MODULE PU
white, approx. 35° Shore A

VERSTEIFUNG
TPU

REINFORCEMENT
TPU



PU
PU



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670130150	35-50	PU individuell PU individual	-	Multiform, grau Multiform, grey	Tropfenform drop shape	universal universal
670130300	35-50	PU individuell PU individual	-	Multiform, grau Multiform, grey	-	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



PU individuell
ohne Pelotte

PU individual
without pad

ART.-NR.
CODE NO.
670130300



NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. In Kombination mit dem OnDry-plus-Bezugsmaterial wird der Tragekomfort des Basismoduls PU gesteigert. Einen zusätzlichen Dämpfungskomfort bietet die Variante mit dem 1,5-mm-starken Polster aus orangefarbenem Multiform.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The wearing comfort of the PU base is further increased by the OnDry plus cover. Additional cushioning comfort is offered by the variant with a 1.5 mm Multiform orange cushioning material.

BASISMODUL PU
weiß, ca. 35° Shore A

BASE MODULE PU
white, approx. 35° Shore A

VERSTEIFUNG
TPU

REINFORCEMENT
TPU



BEZUG
OnDry plus, jeans

COVER
OnDry plus, denim

ART.-NR.
CODE NO.
670110347



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670110347	35–50	PU mit Bezug PU with cover	OnDry plus, jeans OnDry plus, denim	–	Tropfenform drop shape	universal universal
670160363	35–50	PU mit Bezug und Polster PU with cover and cushioning	OnDry plus, melange OnDry plus, melange	Multiform, orange Multiform, orange	Tropfenform drop shape	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



PU MIT BEZUG UND POLSTER
OnDry plus, melange
Multiform, orange, ca. 30° Shore A, 1,5 mm

PU BASE WITH COVER AND CUSHIONING
OnDry plus, melange
Multiform, orange, approx. 30° Shore A, 1,5 mm



ART.-NR.
CODE NO.
670160363

NOVAPED PU KORK

Der Novaped PU Kork Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente und einem gespritzten EVA Kork-Bauteil hergestellt. Das Korkelement stabilisiert den Rückfuß, der PU-Schaum wirkt polstern und dämpfend. Die Variante mit dem Multiform-Polster bietet einen zusätzlichen Dämpfungskomfort und ermöglicht eine sehr gute Verklebbarkeit und individuelle Weiterverarbeitung.

The Novaped PU cork insole blank is made from a high-quality PU foam component and an injected EVA cork component. The cork element stabilises the hindfoot, while the PU foam provides cushioning and padding. The variant with the Multiform cushioning, provides additional padded comfort and enables very good gluing properties and individual finishing.



POLSTER
langsohlig
PU, weiß, ca. 35° Shore A

CUSHIONING
long
PU, white, approx. 35° Shore A

ART.-NR.
CODE NO.
670210348

UNTERBAU
EVA Kork-Bauteil,
braun, ca. 65° Shore A

BASE
EVA cork component,
brown, approx. 65° Shore A

BEZUG
OnDry plus, melange

COVER
OnDry plus, melange



PU
PU



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670210348	35-48	PU Kork PU cork	OnDry plus, melange OnDry plus, melange	PU, weiß PU, white	EVA Kork, braun EVA cork, brown	Tropfenform drop shape	universal universal
670230150	35-48	PU Kork individuell PU cork individual	-	PU, weiß/Multiform, grau PU, white/Multiform, grey	EVA Kork, braun EVA cork, brown	Tropfenform drop shape	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



PU KORK INDIVIDUELL
mit Polster
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 1,5 mm

PU CORK INDIVIDUAL
with cushioning
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 1,5 mm

ART.-NR.
CODE NO.
670230150



NOVAPED SENSOCAD

Die gefrästen Novaped sensoCAD Einlagenrohlinge bieten eine ganzheitliche und aktive Versorgung des Trägers. Mit ihren speziell geformten Elementen üben die Einlagenrohlinge gezielte sensorische Reize auf die Fußsohle aus, welche motorische Reaktionen durch Muskelanspannung oder -entspannung hervorrufen. So können Fehlstellungen und Ungleichgewichte korrigiert werden. Die Novaped sensoCAD Einlagenrohlinge sind aus EVA Fräsmaterial mit einer Festigkeit von 35° Shore A gefertigt und auf der Unterseite mit Skin Folientechnik verstärkt.

The milled Novaped sensoCAD insole blanks provide holistic and active care for the user. With their specially shaped elements, the insole blanks exert targeted sensory stimuli on the sole of the foot, which cause motor reactions through muscle tension or relaxation. In this way, malpositions and imbalances can be corrected. The Novaped sensoCAD insole blanks are made of EVA milling material with a Shore A hardness of 35° and are reinforced on the underside with skin film technology.

INTENSITÄT DER SENSOMOTORISCHEN ELEMENTE INTENSITY OF SENSOMOTORIC ELEMENTS




leicht
light



mittel
medium



stark
strong

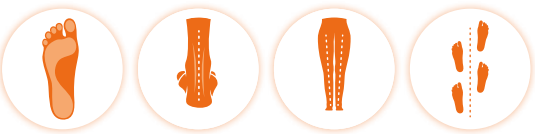

- * • neutraler Gang (Ausgleichseinlage)
- Normalfuß (Ausgleichseinlage)
- neutral gait (balancing insole)
- normal foot (balancing insole)



neutral

ART.-NR.
CODE NO.
773501000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773501000	19-50	sensoCAD neutral, rechts sensoCAD neutral, right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, orange skin film technology, orange	universal universal
773502000	19-50	sensoCAD neutral, links sensoCAD neutral, left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, orange skin film technology, orange	universal universal




- * außenrotierter Gang
- Knickfuß
- Senkfuß
- Plattfuß
- externally rotated gait
- skew foot
- fallen arches
- flat foot



planovalgus

ART.-NR.
CODE NO.
773511000

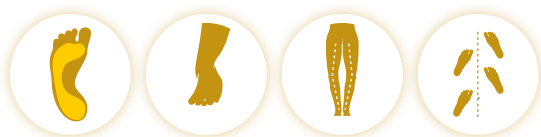

- * innenrotierter Gang
- Sichelfuß
- vorbehandelter Klumpfuß
- internally rotated gait
- pigeon toes
- previously treated club foot



adductus

ART.-NR.
CODE NO.
773521000



SENSOMOTORISCH
SENSORY

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773511000	19–50	sensoCAD planovalgus , rechts sensoCAD planovalgus , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, grün skin film technology, green	universal universal
773512000	19–50	sensoCAD planovalgus , links sensoCAD planovalgus , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, grün skin film technology, green	universal universal
773521000	19–50	sensoCAD adductus , rechts sensoCAD adductus , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, gelb skin film technology, yellow	universal universal
773522000	19–50	sensoCAD adductus , links sensoCAD adductus , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, gelb skin film technology, yellow	universal universal

NOVAPED SENSOCAD



- * Hohlfuß
- high arches



cavus

ART.-NR.
CODE NO.
773531000



- * Zehenspitzenangang
- Spitzfuß
- walking on tiptoe
- pointed foot



equinus

ART.-NR.
CODE NO.
773541000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773531000	19–50	sensoCAD cavus , rechts sensoCAD cavus , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, blau skin film technology, blue	universal universal
773532000	19–50	sensoCAD cavus , links sensoCAD cavus , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, blau skin film technology, blue	universal universal
773541000	19–50	sensoCAD equinus , rechts sensoCAD equinus , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, rot skin film technology, red	universal universal
773542000	19–50	sensoCAD equinus , links sensoCAD equinus , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, rot skin film technology, red	universal universal

NOVAPED S90 PLATEAU

Der schalige Einlagenrohling Novaped S90 Plateau mit Fersenplateau bietet einen hohen Tragekomfort. Er stützt und korrigiert Fußfehlstellungen. Das Fersenplateau mit seiner vergrößerten Auflagefläche stabilisiert und verbessert im Stand die Kraftübertragung auf den Schuhboden.

The cup-shaped Novaped S90 Plateau insole blank with heel plateau offers a high level of comfort. It supports and corrects foot malpositions. The heel plateau with its enlarged support surface provides stability and improves transmission of force onto the sole of the shoe.



POLSTER
langsohlig
Multiform, orange,
ca. 30° Shore A, 2 mm

CUSHIONING
long
Multiform, orange,
approx. 30° Shore A, 2 mm

BEZUG
Pigreco, orange
COVER
Pigreco, orange

UNTERBAU
Folientechnik mit Textilunterfutter,
transparent/blau

BASE
film technology with textile underlining,
transparent/blue

VERSTÄRKUNG
Scheinflex
REINFORCEMENT
Scheinflex

FERSENPLATEAU
HEEL PLATEAU



ART.-NR.
CODE NO.
980360000



KINDER
KIDS

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
980360000	19/20–33/34 35–47	S90 Plateau (schalig) S90 Plateau (cup-shaped)	Pigreco, orange Pigreco, orange	Multiform, orange Multiform, orange	Folientechnik film technology	–	schmal narrow

NOVAPED PERFORMANCE

Von der Deckschicht bis zum Unterbau kombinieren die Novaped Performance Einlagenrohlinge unterschiedliche Materialeigenschaften, um eine optimale Bewegungsführung und -unterstützung zu ermöglichen. Abhängig von der Bewegungsart, Intensität und Umfang der Aktivität werden drei unterschiedliche Ausführungen angeboten: SOFT, MEDIUM und PLUS. Aufgrund der speziellen Verarbeitung des Unterbaus lassen sich die Einlagenrohlinge besonders effizient und zeitsparend weiterverarbeiten.

From the top layer to the substructure, the Novaped Performance insole blank combines different material properties to provide optimal movement guidance and support. Depending on the type of movement, intensity and scope of the activity, three different versions are offered: SOFT, MEDIUM and PLUS. Due to the special processing of the substructure, the insole blanks can be processed particularly efficiently and in a time-saving manner.

für komfortable Alltagsaktivitäten
for comfortable everyday activities



POLSTER FUNKTIONSEBENE
langsohlig
Multiform hybrid, blau,
ca. 20° Shore A, 2 mm
weich, dämpfend

CUSHIONING FUNCTIONAL LEVEL
long
Multiform hybrid, blue,
approx. 20° Shore A, 2 mm
soft, cushioning

POLSTER MEHRZONENEbene
langsohlig
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm
Multiform hybrid, blau, ca. 20° Shore A, 2 mm

CUSHIONING MULTI-ZONE LEVEL
long
Multiform, grey, ca. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte, black, ca. 40° Shore A, 2 mm
Multiform hybrid, blue, approx. 20° Shore A, 2 mm

MEHRZONENUNTERBAU
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

MULTI-ZONE BASE
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

VERSTÄRKUNG THK
REINFORCEMENT THK



ART.-NR.
CODE NO.
978110000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
978110000	35–48	Performance SOFT	Multiform hybrid, blau/Multiform, grau/Multiforte, schwarz Multiform hybrid, blue/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978120000	35–48	Performance MEDIUM	p ² absorb, grün/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p ² absorb, green/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978130000	35–48	Performance PLUS	p ² rebound, rot/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p ² rebound, red/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal

für dynamisch wechselnde Aktivitäten for dynamic activities



**POLSTER
FUNKTIONSEBENE**
langsohlig
p² absorb, grün,
ca. 22° Shore A, 2 mm
stoßabsorbierend, entlastend

**CUSHIONING
FUNCTIONAL LEVEL**
long
p² absorb, green,
approx. 22° Shore A, 2 mm
shock-absorbing, relieving

ART.-NR.
CODE NO.
978120000

**POLSTER
MEHRZONENEbene**
langsohlig
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm
p² absorb, grün, ca. 22° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING
MULTI-ZONE LEVEL**
long
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte black, approx. 40° Shore A, 2 mm
p² absorb, green, approx. 22° Shore A, 2 mm

MEHRZONENUNTERBAU
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

MULTI-ZONE BASE
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG
THK**
**REINFORCEMENT
THK**



für ausdauernd sportliche Aktivitäten for high-endurance sporting activities



**POLSTER
FUNKTIONSEBENE**
langsohlig
p² rebound, rot,
ca. 15° Shore A, 2 mm
federnd, energierückführend

**CUSHIONING
FUNCTIONAL LEVEL**
long
p² rebound, red,
approx. 15° Shore A, 2 mm
springy, energy-returning

ART.-NR.
CODE NO.
978130000

**POLSTER
MEHRZONENEbene**
langsohlig
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm
p² rebound, rot, ca. 15° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING
MULTI-ZONE LEVEL**
long
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 2 mm
p² rebound, red, approx. 15° Shore A, 2 mm

MEHRZONENUNTERBAU
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

MULTI-ZONE BASE
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG
THK**
**REINFORCEMENT
THK**



SPORT
SPORTS

NOVAPED SPORTS

Novaped Sports Einlagenrohlinge sind für verschiedene Sportarten und ihre spezifischen Bewegungs- und Belastungsmuster konzipiert. Mit einem Höchstmaß an Tragekomfort beugen sie Überlastungen vor und tragen zur Linderung von bereits bestehenden Beschwerden bei. Es handelt sich um hochwertige Kunststoffrohlinge in bewährter Folientechnik, die sich durch eine geringe Bauhöhe und eine an die jeweiligen Sportschuharten angepasste Passform auszeichnen.

Novaped Sports insole blanks are designed for different sports and their specific movement and stress patterns. They prevent overstraining and contribute to the relief of already existing complaints with a very high level of wearing comfort. They are high-quality synthetic blanks with proven film technology, which are characterised by a low construction height with a coordinated fit to the respective types of sports shoes.



ART.-NR.
CODE NO.
987620000

TORSIONSSTÜTZE TORSION SUPPORT

ENTLASTUNGSPOLSTER

p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm

PRESSURE-RELIEVING PAD

p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1,5 mm

VERSTÄRKUNG

Scheinflex

REINFORCEMENT

Scheinflex

UNTERBAU

Folientechnik

BASE

film technology



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
987620000	35-53	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	Tropfenform drop shape	breit wide
987624000	35-46	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow
987610000	29/30-33/34 35-48	Fußball Soccer	ARU-X-Static, schwarz ARU-X-Static, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
987610000

FUSSBALL

Zusatzpolster des Großzehballens/
Unterstützung Vorfußaußenrand
schalige Rückfußfassung

SOCCER

additional cushioning of the ball of the big toe/
support of forefoot outer edge
cup-shaped back part of the foot



NOVAPED ACTIVE

Die in Frästechnik hergestellten Novaped Active Einlagenrohlinge sind für die spezifischen Anforderungen im Breitensport konzipiert. Um Überlastungsschäden entgegenzuwirken bieten sie optimale Stabilität und Dämpfung der Füße, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule. Sie bestehen aus Fräsmaterial in unterschiedlichen Shore-Härten in mehrschichtig horizontaler Ausführung und bieten orthopädisch wirksame Unterstützung der Fußgewölbe. Die Fräsrohlinge sind leicht zu beschleifen und gut zu verkleben.

The Novaped Active insole blanks manufactured using milling technology are designed for sport-specific requirements in mass sports. To counteract overuse injuries, they offer optimal stability and cushioning for the feet, knee and hip joints and the spine. They consist of milling material in different Shore hardnesses in a multi-layer horizontal design and offer orthopaedically effective support for the arch of the foot. The milling blanks are easy to grind and glue well.



FRÄSMATERIAL
EVA Fräsmaterial, weiß, 35° Shore A

MILLING MATERIAL
EVA milling material, white, 35° Shore A

FRÄSMATERIAL
EVA Fräsmaterial, blau, 45° Shore A

MILLING MATERIAL
EVA milling material, blue, 45° Shore A

ART.-NR.
CODE NO.
772001000

UNTERBAU
EVA Fräsmaterial,
blau, 45° Shore A

BASE
EVA milling material,
blue, 45° Shore A



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
772001000	35-50	Active Herren Active men	EVA Fräsmaterial, blau/weiß EVA milling material, blue/white	anatomisch anatomical	breit wide
772002000	35-48	Active Damen Active women	EVA Fräsmaterial, blau/gelb EVA milling material, blue/yellow	anatomisch anatomical	universal universal
772004000	29/30-33/34 35-50	Active Fußball Active soccer	EVA Fräsmaterial, blau/türkis EVA milling material, blue/turquoise	anatomisch anatomical	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ACTIVE DAMEN
ACTIVE WOMEN

ART.-NR.
CODE NO.
772002000



ART.-NR.
CODE NO.
772004000

ACTIVE FUSSBALL
ACTIVE SOCCER



NOVAPED SOFT PROTECT

Die Novaped Soft Protect Einlagenrohlinge sind speziell für den Einsatz in Sicherheitsschuhen der angegebenen Sicherheitsschuhhersteller entwickelt. Durch die Verwendung der zertifizierten Bezugstoffe und die Einhaltung der Fertigungsanweisungen sind diese konform mit den Baumusterprüfbescheinigungen der Sicherheitsschuhhersteller. Eine Auflistung der zertifizierten Sicherheitsschuhe kann bei den Sicherheitsschuhherstellern angefordert oder heruntergeladen werden.

Novaped Soft Protect insole blanks are specially developed for use in safety shoes from the indicated safety shoe manufacturers. If used with the certified cover materials and in compliance with the manufacturing instructions, they are compliant with the type examination certificates of the safety shoe manufacturers. A list of certified safety shoes can be requested from the safety shoe manufacturers or downloaded on their website.



FERSENPOLSTER
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 2 mm

HEEL PAD
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 2 mm

BEZUG/POLSTER-KOMBINATION
langsohlig
ELTEN ESD Pro, schwarz, 4,3 mm


COVER/CUSHIONING COMBINATION
long
ELTEN ESD Pro, black, 4.3 mm

UNTERBAU
Multiforte, schwarz,
ca. 40° Shore A, 12 mm

BASE
Multiforte, black,
approx. 40° Shore A, 12 mm

VERSTÄRKUNG
THK

REINFORCEMENT
THK

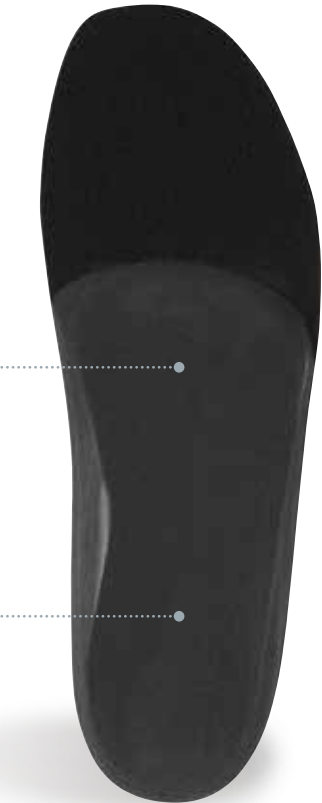

ART.-NR.
CODE NO.
979610000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG/POLSTER KOMBINATION COVER/CUSHIONING COMBINATION	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979610000	35-50	ELTEN	ELTEN ESD Pro, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD Pro, black, 4.3 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979614000	35-50	ATLAS	ATLAS Ergo-Med, schwarz, 2,5 mm ATLAS Ergo-Med, black, 2.5 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979612000	35-50	STEITZ SECURA	STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, schwarz, 2 mm STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, black, 2 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979613000	35-50	HAIX	HAIX CO-System, weiß/grün, 3,7 mm HAIX CO-System, white/green, 3.7 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal



FERSENPOLSTER
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 2 mm

HEEL PAD
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 2 mm

ART.-NR.
CODE NO.
979614000



BEZUG/POLSTER-KOMBINATION
langsohlig
ATLAS Ergo-Med, schwarz, 2,5 mm

COVER/CUSHIONING COMBINATION
long
ATLAS Ergo-Med, black, 2.5 mm



ART.-NR.
CODE NO.
979612000



BEZUG/POLSTER-KOMBINATION
langsohlig
STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, schwarz, 2 mm

COVER/CUSHIONING COMBINATION
long
STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, black, 2 mm



FERSENPOLSTER
p² resorb, schwarz,
ca. 12° Shore A, 2 mm

HEEL PAD
p² resorb, black,
approx. 12° Shore A, 2 mm

ART.-NR.
CODE NO.
979613000



BEZUG/POLSTER-KOMBINATION
langsohlig
HAIX CO-System, weiß/grün, 3,7 mm

COVER/CUSHIONING COMBINATION
long
HAIX CO-System, white/green, 3.7 mm

UNTERBAU
Multiforte, schwarz,
ca. 40° Shore A,
12 mm

BASE
Multiforte, black,
approx. 40° Shore A,
12 mm

VERSTÄRKUNG
THK

REINFORCEMENT
THK



BESONDERHEIT
Vorfußperforation

CHARACTERISTICS
forefoot perforation

UNTERBAU
Multiforte, schwarz,
ca. 40° Shore A,
12 mm

BASE
Multiforte, black,
approx. 40° Shore A,
12 mm



UNTERBAU
Multiforte, schwarz,
ca. 40° Shore A,
12 mm

BASE
Multiforte, black,
approx. 40° Shore A,
12 mm

VERSTÄRKUNG
THK

REINFORCEMENT
THK



SICHERHEIT
SAFETY

NOVAPED FLEX BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus zuverlässigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot.



POLSTER
langsohlig
Multiform, beige,
ca. 30° Shore A, 3 mm

CUSHIONING
long
Multiform, beige,
approx. 30° Shore A, 3 mm

BEZUG
Paraskin perforiert, beige
COVER
Paraskin perforated, beige



UNTERBEZUG
Paraskin, 3/4-lang

BASE COVER
Paraskin, 3/4 length

VERSTÄRKUNG
flexibler Stratos-Kern

REINFORCEMENT
flexible Stratos core

ART.-NR.
CODE NO.
959001000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959001000	35–48	Flex Basic Flex Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal

NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Calcaneus Einlagenrohling hat eine Aussparung in der Fersenmitte mit zusätzlicher Polsterung für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus. Der Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic Calcaneus insole blank has a cutout in the centre of the heel with additional padding for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot of the user.



POLSTER
langsohlig
Multiform, beige,
ca. 30° Shore A, 3 mm

CUSHIONING
long
Multiform, beige,
approx. 30° Shore A, 3 mm

UNTERBEZUG
Paraskin, 3/4-lang


BASE COVER
Paraskin, 3/4 length

VERSTÄRKUNG
flexibler Stratos-Kern
mit Fersenaussparung und
Polster aus ARU®foam,
lachs, ca. 10° Shore A, 3 mm

REINFORCEMENT
flexible Stratos core
with heel cutout and
cushioning made of ARU®foam,
salmon, approx. 10° Shore A, 3 mm

BEZUG
Paraskin perforiert, beige

COVER
Paraskin perforated, beige

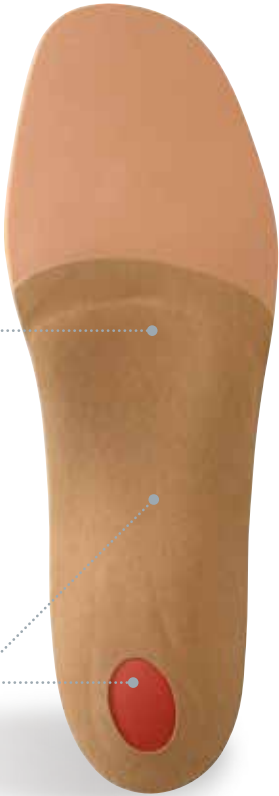

ART.-NR.
CODE NO.
959010000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959010000	35–48	Flex Basic Calcaneus Flex Basic Calcaneus	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	breit wide

NOVAPED SOFT BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der in Weichpolstertechnik hergestellte bettende Novaped Soft Basic Einlagenrohling sorgt dabei für effektive Druckentlastung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene langsohlige Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The Novaped Soft Basic insole blank, manufactured using soft cushioning technology, provides effective pressure relief for the foot. It has a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The long pre-ground base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy customisation to the user's foot.



POLSTER
langsohlig
Multiform, beige,
ca. 30° Shore A, 3 mm

CUSHIONING
long
Multiform, beige,
approx. 30° Shore A, 3 mm

ART.-NR.
CODE NO.
979010006

UNTERBAU
langsohlig, vorgeschliffen
Multiforte, beige, ca. 40° Shore A,
10 mm

BASE
long, pre-ground
Multiforte, beige, approx. 40° Shore A,
10 mm

VERSTÄRKUNG
EVA, ca. 60° Shore A

REINFORCEMENT
EVA, approx. 60° Shore A



BEZUG
Paraskin perforiert, beige

COVER
Paraskin perforated, beige



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979010006	35–48	Soft Basic Soft Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Multiforte, beige Multiforte, beige	Tropfenform drop shape	breit wide

NOVAPED KORK BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der bettende Novaped Kork Basic Einlagenrohling sorgt dabei für Druckentlastung und gleichzeitige Stabilisierung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene Thermokork-Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The cushioning Novaped Cork Basic insole blank provides pressure relief and stabilisation of the foot at the same time. It features a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The pre-ground thermo-cork base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy individual adaptation to the user's foot.



POLSTER
langsohlig
Multiform, beige,
ca. 30° Shore A, 3 mm

CUSHIONING
long
Multiform, beige,
approx. 30° Shore A, 3 mm

UNTERBAU
Kunstkork S/ARU®fant, beige
ca. 50° Shore A, 10 mm

BASE
artificial cork S/ARU®fant, beige
approx. 50° Shore A, 10 mm

VERSTÄRKUNG
THK

REINFORCEMENT
THK

BEZUG
Paraskin, beige

COVER
Paraskin, beige




ART.-NR.
CODE NO.
979000006



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979000006	35–48	Kork Basic Cork Basic	Paraskin, beige Paraskin, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Kunstkork S/ARU®fant, beige artificial cork S/ARU®fant, beige	Tropfenform drop shape	breit wide

03.0955; 12.03.23

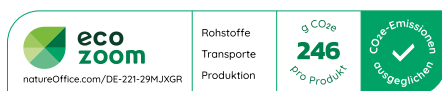

099990303

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
remscheid@schein.de
www.schein.de

